

¿Por qué KDM By PeriOptix?



KDM by PeriOptix se esfuerza por proporcionar tecnologías de aumento e iluminación de alta calidad que permitan al profesional dental identificar y determinar problemas e implementar soluciones para sus pacientes a un costo asequible.


Nuestros productos no solo mejoran la atención del paciente a través de una mejor agudeza visual, sino que también promueven una ergonomía adecuada que puede reducir la fatiga y prolongar la longevidad profesional.

- **KDM by PeriOptix** es un producto de vanguardia con una altísima calidad.
- Las luces **Firefly®** y **LumiPro™** ofrecen a los usuarios una variedad de funciones para satisfacer sus necesidades.
- **KDM by PeriOptix** nos ofrece opciones de lupas y luces ligeras de primera calidad.


Observa las diferencias con KDM by PeriOptix

Todas las ópticas **KDM by PeriOptix** están fabricadas con vidrio de alta gama resistente a roturas. Asegura una claridad óptima de borde a borde con un gran campo de visión. Nuestra variedad de opciones de aumento y estilos de lupas garantizan que se satisfagan las necesidades con una solución elegante y personalizable.


Sin Magnificación

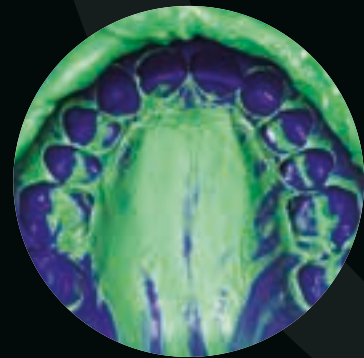


Magnificación 2.5x

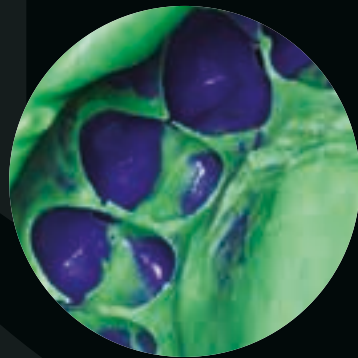


Magnificación 3.5x

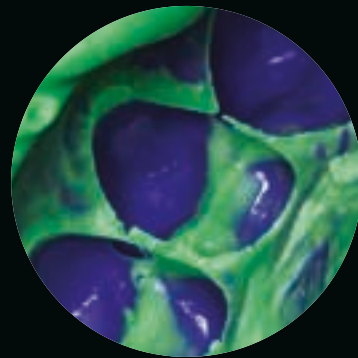

Campo de visión de trabajo pequeño

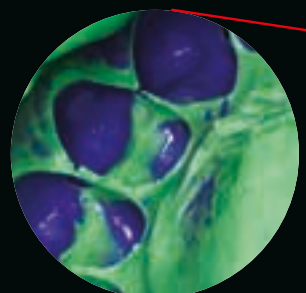

Campo de visión de trabajo grande

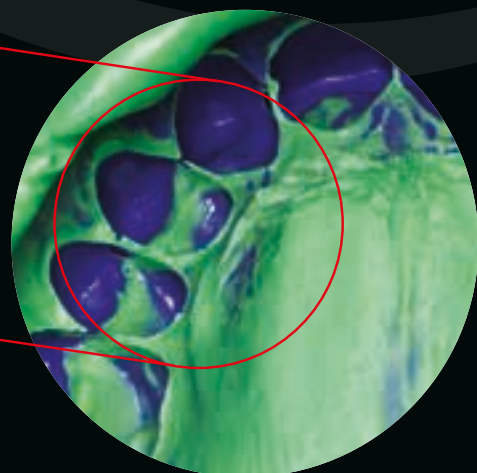

Por lo general se obtiene mayor magnificación en un campo de visión más pequeño


KDM by PeriOptix a tu medida



Distancia pupilar

La distancia pupilar (DP) es la medida, en milímetros, entre los centros de las pupilas de cada ojo. Esta medición la puede realizar rápidamente el Promotor de **KDM by PeriOptix** o cualquier optometrista.

Nota: Si lo mide un optometrista que no sea de Grupo Kalma, asegúrate de que la medición se toma al infinito. (∞).

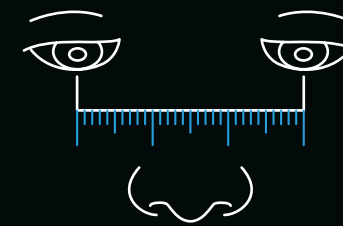


Reservado para tu medición:

Right PD	Total PD	Left PD

Distancia de trabajo

La distancia de trabajo (DT) es la medida, en centímetros, de la distancia con la cual el dentista trabaja de forma cómoda. Esta distancia se mide cuando el dentista mantiene una postura vertical y cómoda con una perfecta ergonomía.

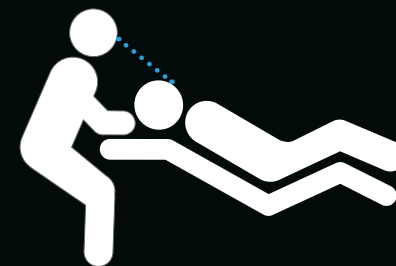

Las lupas **KDM by PeriOptix** son 100% personalizables, adaptándolas a las diferentes patologías de la visión que pueda tener el odontólogo, así como a su distancia pupilar y a su distancia de trabajo.

¿Te gustaría que nuestros ópticos optometristas te realizaran un estudio completo para la personalización de las lupas?

¡¡Solicita estudio completo para la personalización de las lupas por nuestros ópticos optometristas en este QR!!



Vers.1 01/2023

Distribuidor Exclusivo en España y Portugal:



Productos, Tecnología, Asesoramiento y Formación Dental

síguenos en:



Avenida de las Nieves, 4 (Pol. Industrial Las Nieves)
28935 Móstoles, Madrid. España
Tel.: +34 91 380 23 83 • info@grupokalma.com

www.grupokalma.com

Distribuidor Exclusivo en España y Portugal:



Productos, Tecnología, Asesoramiento y Formación Dental

Lupas • Monturas • Luces leds




Maximiza la claridad, ergonomía y control.



¡A medida y personalizadas!

¡¡Solicita estudio completo para la personalización de las lupas por nuestros ópticos optometristas!!

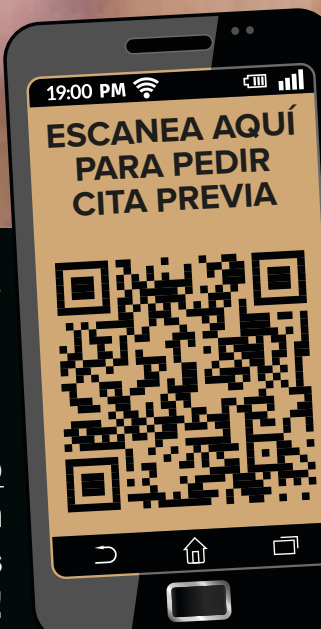

Lupas



Lupas premium personalizadas con extrema calidad de borde a borde.

Las lupas personalizadas se fabrican con componentes de vanguardia bajo estrictos estándares de calidad, que brindan nitidez y claridad de borde a borde sin aberraciones ópticas o distorsión del color.



HDMax™ 2.5 TTL Loupes
Lupas HDMax™ 2.5 TTL
Peso: 47 gramos
Campo de visión: 3,5 pulgadas
Profundidad de campo: 5,5 pulgadas

HDMax™ 3.0 TTL Loupes
Lupas HDMax™ 3.0 TTL
Peso: 48 gramos
Campo de visión: 3,25 pulgadas
Profundidad de campo: 5 pulgadas

HDMax™ 3.5 TTL Loupes
Lupas HDMax™ 3.5 TTL
Peso: 51 gramos
Campo de visión: 3 pulgadas
Profundidad de campo: 4,5 pulgadas

Prismatic 4.0x TTL Loupes
Lupas prismáticas TTL 4.0x
Peso: 61 gramos
Campo de visión: 2,5 pulgadas
Profundidad de campo: 2,5 pulgadas

Ergonomía

Consecuencias anatómicas

El 90% de los dentistas tiene problemas de visión y entre el 60 y el 80% tiene problemas de espalda y cuello.

Con **KDM by PeriOptix** podemos mejorar y atajar ambos problemas, ya que trabajar con magnificación nos ayuda a no necesitar inclinarse sobre el paciente, manteniendo una postura ergonómica.

Con las lupas **KDM by PeriOptix**:

- Mejora el sistema acomodativo de la visión.
- Beneficia una correcta ergonomía.
- Obtenemos una mayor calidad, precisión y seguridad en los tratamientos.
- Con unos resultados más satisfactorios para el profesional y el paciente.



Monturas



Siente la diferencia PeriOptix.

Ninguna característica es más importante para la comodidad que la montura. Las monturas **KDM by PeriOptix** tienen una amplia variedad de estilos y ajustes, lo que brinda comodidad general y personalización para nuestros clientes.

KDM by PeriOptix proporciona monturas avanzadas de alta calidad para satisfacer las necesidades de su trabajo en la clínica dental, al tiempo que se adapta a sus preferencias de estilo.

Montura deportiva PeriVista


La montura deportiva PeriVista está fabricada a medida para su uso con lupas **KDM by PeriOptix**. Esta es nuestra opción de montura más popular porque brinda protección envolvente con un diseño elegante. Esta montura también permite al usuario realizar ajustes para mejorar la adaptación a su rostro.

- Disponibles lentes con prescripción.

Variando la posición de las varillas conseguimos más ergonomía y precisión en la distancia de trabajo (DT)




Colores disponibles para las monturas

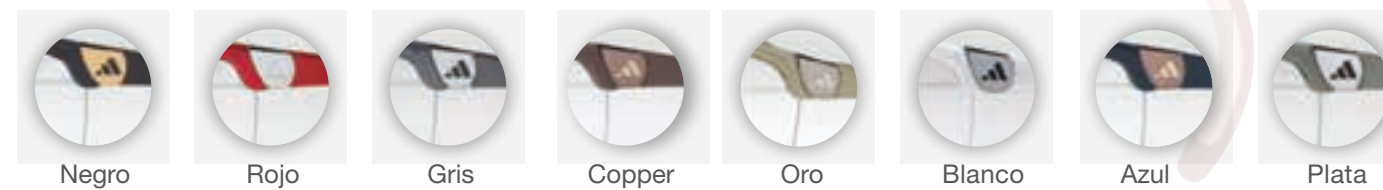

Una postura correcta, mejora la visión y reduce los dolores de espalda y cuello.

Enfoque ergonómico

El modelo PeriVista está dotado de un mecanismo de varilla que permite la variación del ángulo pantoscópico facilitando 3 posiciones del ángulo de inclinación sin alterar la distancia de trabajo del usuario (mayor ergonomía).

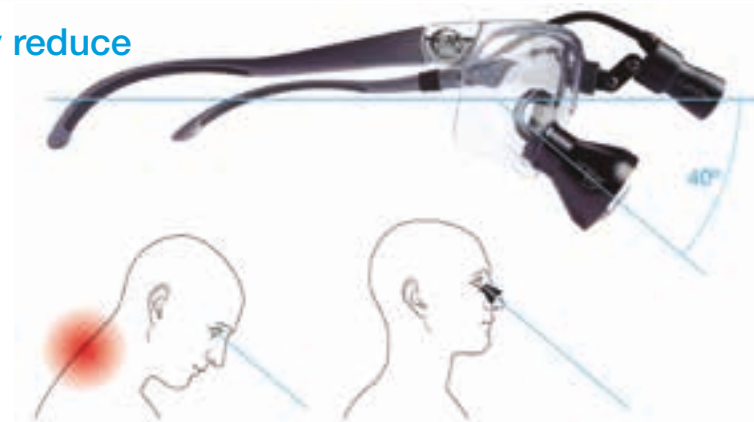

*Todas las medidas se toman con una montura deportiva PeriVista a una distancia de trabajo larga.

Luces



Observa lo que te has estado perdiendo.

KDM by PeriOptix mejora la agudeza visual a través de potentes luces que eliminan las sombras en la cavidad bucal, eliminando la necesidad de un ajuste constante de la iluminación del techo. Proporcionan una salida de color uniforme y natural necesaria para garantizar el mejor resultado con sus pacientes.

LumiPro™ Headlight Systems

Diseñada para una luz uniforme nítida extrema de borde a borde

La luz LumiPro™ cuenta con componentes de vanguardia creados bajo estrictos controles y estándares de calidad. El resultado es claro: una emisión uniforme de luz natural que no compromete el tamaño, el color o la intensidad del punto.

Diseñada para una luz uniforme, nítida, extrema de borde a borde.

	LumiPro	Competidor 1	Competidor 2
Peso	8g	10.8g	8g
Campo de iluminación	90mm	85mm	72mm
Temperatura del color	5500K	6500K	4500K
Intensidad	102 Lumens	68 Lumens	60 Lumens
Autonomía	10+ horas on higt	8 horas	8 horas

Su diseño ligero alivia la tensión del cuello.

Aunque significativamente más pequeña, LumiPro™ también es más ligera que la mayoría de las luces del mercado. Promueve una postura ergonómica y reduce el riesgo de tensión excesiva en el cuello y el cuerpo.



LED Firefly™

- Intensidad de Luz: 2 opciones — high 32.000 lux y low 20.000 lux
- Peso: 28 g
- Campo de iluminación: 70 mm
- Autonomía: 150 minutos en low, 90 minutos en high
- Tiempo estimado de carga: Cargan ambos focos en 2 h.
- Disponible en tres colores: negro, rojo y azul
- Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y para la mayoría de las lupas del mercado.



LED RC Mini™

- Intensidad de Luz: Totalmente ajustable hasta 40,000 lux.
- Peso: 9 g
- Campo de iluminación: 75 mm
- Autonomía estimada: 8 horas
- Tiempo estimado de carga: 3 horas
- Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y para la mayoría de las lupas del mercado.

